

## BOMBAS PERISTÁLTICAS - FLUJO VARIABLE - CABEZALES MÚLTIPLES

### Modelos D25V2i, D25V4i y D25VT2i

- ◆ Control numérico de velocidad independiente para cada cabezal con repetitividad 1%.
- ◆ Control remoto por pedal o relé externo.
- ◆ Cabezales 50-2r con rotor de 2 rodillos y de 4 rodillos en el cabezal CFV-4r
- ◆ Interruptor ON/OFF individual por cabezal con inversor de flujo
- ◆ Temporizador cíclico digital en los modelos T para programar tiempos repetitivos de bombeo y paro de 0,01 segundos a 99,90 horas lo que hace posible obtener cualquier volumen en cada ciclo del temporizador.
- ◆ Control de velocidad por señal analógica opcional 0-10 volts. Consultar esta opción




D25V2i



D25V4i

Se fabrican bombas con múltiples cabezales adaptadas a las necesidades del usuario

### CABEZAL CFV-4r

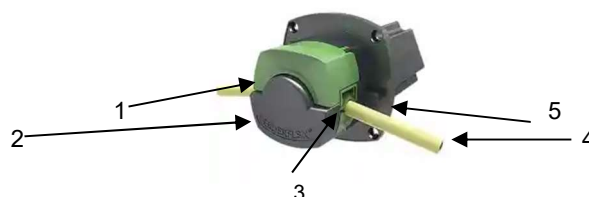

- 1- Cubierta móvil del cabezal para el cambio de tubo
- 2- Cubierta inferior fija
- 3- Retén del tubo
- 4- Tubo peristáltico
- 5- Palanca liberadora para cambio de cabezal

### Códigos Bombas. 100... 240V 50/60Hz

Código	Modelo	Cabezales	Temporizador	Caudal ml/min	Motor rpm
1.9733.05	D25V2i	2x50-2r	No	0,1-100	30
1.9738.00	D25V2i	2x50-2r	No	0,4-300	80
1.9738.01	D25V2i	2x50-2r	No	1-700	240
1.9734.05	D25V4i	4x50-2r	No	0,1-100	30
1.9739.00	D25V4i	4x50-2r	No	0,4-300	80
1.9739.01	D25V4i	4x50-2r	No	1-700	240
1.9738.17	D25VT2i	2xCFV-4r	Si	0,25-250	240
1.9733.04	D25VT2i	2xCFV-4r	Si	0,08-85	80
1.9733.11	D25VT2i	2xCFV-4r	Si	0,02-25	15
1.9733.12	D25VT2i	2xCFV-4r	Si	0,03-30	30

Dimensiones: con 2 cabezales, 32x26x14cm. Peso: 5  
Dimensiones: con 4 cabezales, 26x34x27cm. Peso: 6Kg

Distribuidor: